

SigmaPace 1000 用ファイル出力ソフト

SP1000 出力プログラム

—— ファイルでデータ保存ができる!! ——



- テキストファイル、PDF* ファイルでデータが保存できます。
- データに判定値の設定ができます。
- 測定データをまとめて1ファイルに保存できます。
- 機器管理ソフト連携で、ファイルデータとして保管できます。
- 通信にUSB—シリアル変換ケーブルが必要です。

*Microsoft Office がインストールされている必要があります。

XXXXXXXXXX病院

機器名 : 機器名 BBB 2
測定者 : 測定者 ddd 4
型番 : 型番 CCC 3
シリアルNO : シリアルNO CCC 3

2013/06/17 14:43:34+++++
不応期測定 TV-A

REFRACTORY TEST - TV/A
SENSE = +20.0 mV
RATE = 60 PPM
PRP = 398 mS
SRP = 481 mS

判定は、NG です。

1 測定データを PDF* に保存した場合
(判定値を付けています。)

XXXXXXXXXX病院

機器名 : 機器名 BBB 2
測定者 : 測定者 ddd 4
型番 : 型番 CCC 3
シリアルNO : シリアルNO CCC 3

2013/06/17 14:40:47+++++
同期測定

DEMAND TEST - TV
RATE = 60 BPM
OVERDRIVE = 69 BPM
UNDERDRIVE = 51 BPM


判定は、OK です。

2013/06/17 14:41:07+++++
出力測定

PULSE TEST - TV
CURRENT = +9.32 mA
VOLTAGE = +4.66 V
RATE = 59.9 PPM
WIDTH = .992 mS
ENERGY = 43.2 uJ

判定は、NG です。

複数測定データを 1PDF* ファイルに保存した場合
(判定値を付けています。)

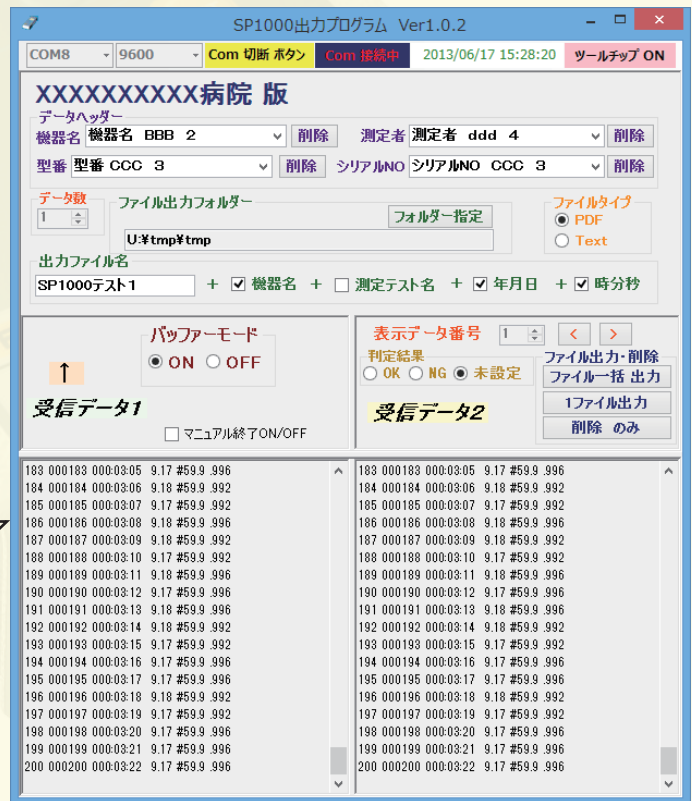

*Microsoft Office がインストールされている必要があります。

- ・右図のように長時間データも保存できます。
- ・保存先フォルダは、ユーザ指定です。
- ・ファイルタイプは、TXT, PDF*, 2種類が指定できます。
- ・ファイル名は、条件がありますが、任意に設定できます。
- ・複数データを、キープすることが出来ます。
- ・手動で、判定値を設定できます。
- ・ファイル出力を、手動、自動、の切り替えができます。

製造販売元
大正医科器械株式会社
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

本社 営業部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22
TEL 06-6553-9686 (代)
FAX 06-6553-9305

東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田1-14-21 2F
TEL 03-6715-8864
FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>
E-mail home@taishobiomed.com

お求め、お問い合わせは・・・